

Safedo 



Sydäniskuri

Sydäniskuri eli defibrillaattori



Äkillinen sydänpysähdys on yksi yleisimmistä työikäisten kuolinsyistä Suomessa. Nopealla elvytyksellä ja sydäniskurin käytöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa lopputulokseen.

Sydänpysähdyspotilaan hoitoketjun ensimmäinen lenkki on maallikko. Jokainen viiveminuutti sydäniskurin käyttöön heikentää selviytymistä 10-12 prosenttiyksikköä.

Suomessa sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä selviytyy alle 10 % autettavista. Jos elvytys voidaan aloittaa heti ja käytössä on sydäniskuri, jopa 50-70 % autettavista selviytyy.

Maallikon suorittama sydäniskurin käyttö on uusi askel elvytystapahtumassa, ja se katsotaan uusien suositusten mukaan toiseksi tärkeimmäksi edistysaskeleeksi elvytyksen historiassa.

Aika on ratkaiseva tekijä

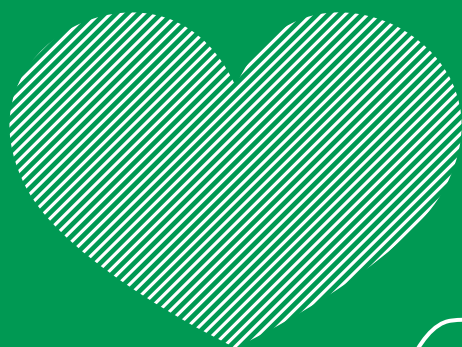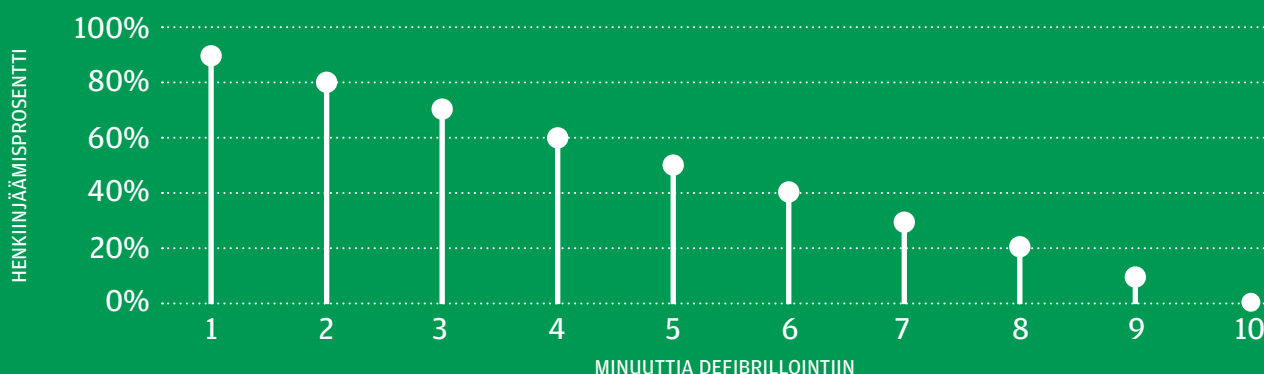

Sydänpysähdyspotilaan hoitoketjun ensimmäinen lenkki on maallikko. Sydäniskurin tulisi olla saatavilla työpaikalla ja julkisissa tiloissa. Se voi auttaa pelastamaan ihmishenkiä!

Lifepak CR 2 -sydäniskuri

Physio-Control Lifepak CR 2 on erittäin helppo-käyttöinen laite. Laite neuvoo auttajaa toimimaan oikein elvytystapahtuman aikana ja se on ainoa markkinoilla, joka pystyy tekemään rytmianalyysin elvytyksen aikana parantaen merkittävästi elvytyksen laatua.

- + Laite on erittäin helppokäyttöinen. Avattuasi laitteen kannen kone ohjeistaa käyttäjää vaihe vaiheelta toimimaan oikein.
- + Kun auttaja asettaa elektrodit autettavalle, laite analysoi potilaan rytmin ja ”tietää” onko rytmi iskua vaativa vai ei. Laite ei anna iskua, mikäli potilas ei sitä tarvitse.
- + Laite käskee antamaan iskun, jos se on tarpeen. Iskun annettua laite ohjaa käyttäjän jatkamaan painelu-puhalluselvytystä yksityiskohtaisin ohjein.
- + Laitteen elektrodit sopivat sekä lapsille (yli 8 vuotta) että aikuisille.

Ominaisuudet

- + Napakat suomenkieliset (optio: kieli vaihdettavissa nappia painamalla) äänikomennot neuvovat käyttäjää.
- + Laitteen käyttökunto voidaan tarkistaa yhdellä silmäyksellä.
- + Puoliautomaattinen, analysoi iskun tarpeellisuuden.
- + Laitteessa on monipuoliset itsetestausominaisuudet.
- + Lifepak on Suomessa käytössä useissa yliopistosairaaloissa ja ensihoidossa.
- + Sama laite sopii lasten elvytykseen nappia painamalla
- + Laitteella on 8 vuoden takuu
- + Elektrodiin säilyvyys 4 vuotta, akun säilyvyys 4 vuotta. Ensimmäisen neljän vuoden aikana käyttökustannukset 0 euroa!
- + Laitteen kielen vaihto nappia painamalla (optio)
- + Sähköposti laitteen käytöstä tai päivitystarpeesta (Wifi ja 3G -mallit)



3 syytä valita Lifepak CR 2 -sydäniskuri

1.

Nykyaikainen, verkkoon kytketty laite

Lifepak CR 2 on varustettu Wifi- tai 3G-yhteydellä (saatavilla myös USB). Verkkoon kytketty laite ilmoittaa itse huoltotarpeesta haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

2.

Antaa elvytys- palautetta ja tukea maallikolle – juuri sopivasti

Vertailututkimuksessa laite antoi parhaan palautteen elvyttäjälle elvytystapahtumassa ja mahdollisti vertailun parhaan elvytystuloksen. Laite minimoi paineluelvytyksen tauot ja sama laite sopii ilman lisäosia myös lasten elvytykseen.

3.

Tehokasta hoitoa

Jos defibrilloitava rytmi havaitaan, CR2 lisää iskujen tehoa asteittain, eikä käyttäjältä tarvita mitään päätöksiä. Jokainen meistä on eri painoinen ja kehomme vastus on erilainen. Tarvitsemme siis erisuuruisen määrän energiaa, jotta sydämemme rytmi saadaan takaisin pumppaamaan. Lifepak CR 2 pystyy antamaan jopa 360 joulen iskuja. Latautumisaika 0 sekuntia ensimmäiseeniskuun (laite on heti valmis antamaan iskun).

Lisävarusteet



Lifepak CR 2 -elektrodit

Elektrodit Physio Control Lifepak CR 2 -sydäniskuriin. Elektrodit tulee vaihtaa käytön jälkeen tai kun niiden pakkauksessa mainittu viimeinen käyttöpäivä on ylittetty.

Lifepak CR 2 -elektrodit ovat liimakiinnitteiset ja niissä on selkeästi värikoodattu kuva elektrodien oikeasta sijoituksesta.

Elektrodit sopivat aikuisten ja lasten (<8v / <25kg) elvytykseen.

Tuotekoodi 11101-000021



Sydäniskurikaappi

Meiltä saat erilaisia sydäniskurikaappeja. Kaappiin voit valita mm. seuraavat ominaisuudet:

- + Hälytys, joka antaa vähintään 95dB:n sireeniäänän kaappia avattaessa.
- + Lämmitys ja jäähditys, joka pitää kaapin halutussa lämpötilassa.
- + Puhelinmoduuli, joka avaa puhelinyhteyden esim. vartiointiliikkeen valvomoon kun kaappi avataan.
- + Sydäniskurin käyttökunnan seuranta erillisellä anturilla siten, että tila voidaan tarkistaa internet-selaimella.
- + Kaappi tunnistaa, kun sydäniskuri poistetaan kaapista.
- + Raportointi ja kaapin tilaseuranta verkon yli (kytketään LAN- tai 3G-yhteydellä).
- + Laitekaappi valokuvaa kaapin aukaisijan.

Tuotekoodi DEFFAKAAPPI



Lifepak CR 2 -akku

Litium-mangaanidioksidi -akku Physio Control CR 2 -sydäniskureihin. Akun valmiusaika on noin 4 vuotta. Akun virta riittää 166 iskuun (200J), 103 iskuun (360J) tai 800 minuutin käyttöön.

Pakkauksessa akku ja vaihto-ohjeet.

Tyyppi: Li/MnO2 12,0V, 4,7 Ah

Tuotekoodi 11141-000165



Metallinen kaappi sydäniskurille sisätiloihin

Metallinen valkea kaappi sydäniskurille, jossa lisäksi sireenihälytys joka hälyttää mikäli kaapin ovi avataan. Kaapissa on lasi-ikkuna, jonka läpi sydäniskurin toimintakunto on helppo tarkistaa. Merkitty kansainvälisellä sydäniskurin merkillä.

Tuotekoodi DEFFAKAAPPI-M



Lifepak CR 2 -puolikova kantolaukku

Puolikova kantolaukku Physio Control Lifepak CR 2 -sydäniskurille. Kantolaukussa on kahva ja laukussa on aukko defibrillaattorin visuaaliselle ilmaisimelle käyttökunnan tarkistamiseksi.

Tuotekoodi 11260-00047



Lifepak CR 2 -seinäteline

Metallinen seinäteline sisätiloihin, jonka avulla saat asennettua Lifepak CR 2 -sydäniskurin näkyvään paikkaan.

Tuotekoodi 11210-00046

Dataplan Lifepak CR 2 3G -yhteydellä varustettuihin laitteisiin

4 vuoden Dataplan 50998-00025

8 vuoden Dataplan 50998-00026



Harjoitussydäniskuri

Lifepak CR 2 harjoitussydäniskuri sydäniskurin käytön harjoitteluun. Laite on ulkomuodoltaan ja toiminoiltaan kuten oikea laite, joten sillä voidaan tehokkaasti ja turvallisesti harjoitella oikean laitteen käyttöä. Harjoitussydäniskuri ei anna oikeita iskuja.

Harjoitussydäniskuri tunnistaa itsenäisesti, kun liimaelektrodit on kiinnitetty nukkeen ja osaa itse siirtää elvytysprotokollassa eteenpäin.

Harjoitussydäniskurissa toimii nappia painamalla kielen vaihto ja lapsitilan käyttöönotto - aivan kuten oikeassa laitteessa!

SÄÄDETTÄVÄT OMINAISUUDET

- Laitteen tekstikielen vaihto
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Puoliautomaattinen/automaattinen käyttötila
- Iskuja suositellaan/ei suositella
- Metronomi 30:2 tai pelkät painallukset
- Elvytysaika
- cprINSIGHT päällä/pois (rytmi-analyysi elvytyksen aikana)
- PPE ei tunnistettu päällä/pois
- Liike tunnistettu päällä/pois
- Kaksikielisyys päällä/pois
- Toinen kieli (jota käytetään kieli-valintanappia painettaessa)
- Tarkista hengitys päällä/pois
- Laite toimii neljällä kappaleella D-paristoja (sis. toimitukseen). Harjoitussydäniskurin mukana toimitetaan kätevä kantokassi, johon mahtuu laitteen lisäksi runsaasti muita koulutustarvikkeita.

Tuotekoodi 11250-000171

MAAHANTUOJA

Safedo

Turvallisempi työpaikka.

Safedo Oyj on työpaikkojen ensiapuvalmiuteen erikoistunut yritys. Toimimme omien alueellisten edustajien kautta koko maassa. Päätoimipaikkamme ja varastomme sijaitsevat Kuopiossa.

SAFEDO OYJ
p. 010 2792 600
info@safedo.fi
www.safedo.fi